

# フィルターバッグ 強化ポリ袋 バックスタンド




**特長** 02-001/02-002/02-007: フィルターで濾過した検液を採取できます。白地部に文字記入が可能です。 **滅菌** ガンマー線滅菌  
 02-003~02-005: ストマッカー用検査袋(フィルター無し)  
 02-006: フィルターバックで検液を採取しやすいように傾斜が付いています。

## フィルターバッグの特徴と使用方法

### ■特徴と使用方法

- ① 濾過フィルターによりピペットの目詰まりが無く検液のみ簡単に採取できます。
- ② 側面に付いている切欠き部を両手で摘んでフィルター部まで引き裂き切り口からマイクロピペットを挿入すると本体を汚さず検液を採取することができます。

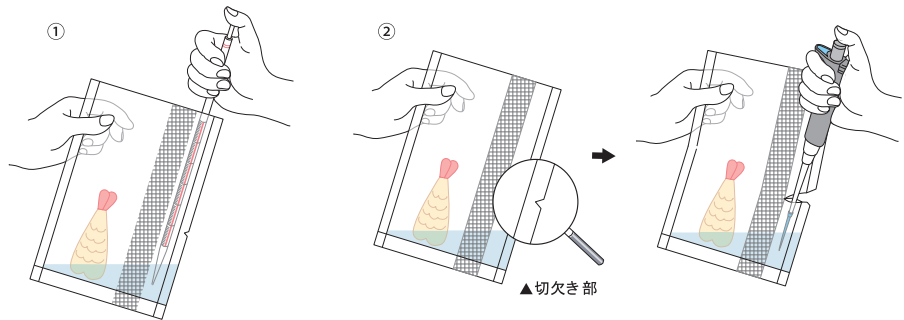

品番	品名	規格	材質	包装単位	箱入数
02-001	フィルターバック	190×300×0.065	ナイロン/PE	50枚×10袋	500枚
02-002	フィルターバックNB	190×280×0.065	ナイロン/PE	50枚×10袋	500枚
02-007	フィルターバックMINI	130×180×0.065	ナイロン/PE	50枚×10袋	500枚
02-003	強化ポリ袋LL	180×300×0.09	PE	50枚×20袋	1000枚
02-004	強化ポリ袋LL ECO	180×280×0.08	PE	50枚×20袋	1000枚
02-005	強化ポリ袋 80型	100×150×0.09	PE	100枚×10袋	1000枚
02-006	バックスタンド	5枚用	PVC	1台	1台